


## 10. Schakelbediening

Wanneer het motorisch niet mogelijk is om afbeeldingen en woorden op het communicatiescherm gericht aan te raken is er nu o.a. de optie om met een externe (eventueel) draadloze knop de TouchToTell op de iPad m.b.v. schakelbediening te gebruiken.

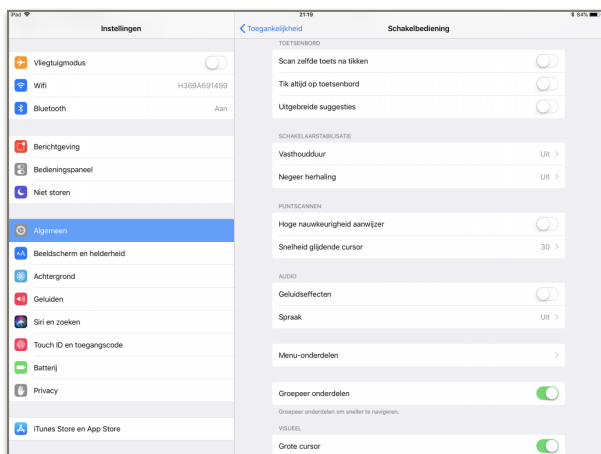

Ga naar de 'Instellingen-App' op je iPad.

Kies 'Algemeen', kies 'Toegankelijkheid' en kies 'Schakelbediening'

Stap 1: Scroll naar beneden en zet het onderdeel 'Groepeer onderdelen' op AAN.  
Stap 2: Kies voor een grote cursor (advies maar niet noodzakelijk)

Stap 3: Bepaal de snelheid van de 'glijdende cursor'

### Vervolg instellen Schakelbediening


Stap 4: Kies 'schakelaars', kies 'Voeg een schakelaar toe' en kies 'Extern' wanneer je gebruik wilt maken van 1 knop.

Je kunt ook kiezen voor 'Scherm' en vervolgens 'schermvullend'.


Het scherm wordt aangeraakt als 'knop' maar de plek van aanraking maakt niet uit.

Stap 5: Bij gebruik van 1 knop moet de 'Scanmethode' op 'Automatisch scannen' staan.

Stap 6: Bepaal voor de eindgebruiker onder 'Timing' de tijd van 'scannen' en van 'pauzeren'.

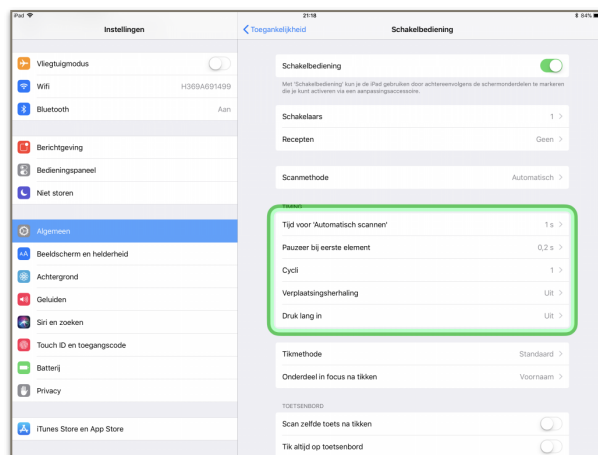

(Zorg dat bij een Bluetooth-schakelaar bluetooth aanstaat.)

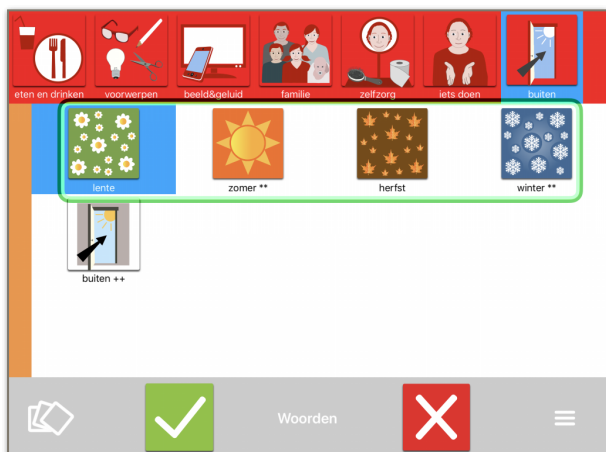

### AAN of UIT zetten Schakelbediening

Stap 7: Zet de **schakelbediening** op AAN.

Stap 8: Druk 3x snel achter elkaar op de **Home-Button**.

De schakelbediening staat nu UIT.

Stap 9: Ga naar de TouchToTell applicatie en open de App. Druk 3x snel achter elkaar op de **Home-Button**.

De schakelbediening staat nu AAN.


## Schakelbediening gebruiken bij Scroll-views:

Stap 1: Ga naar de 'Instellingen-App' op je iPad.


Kies 'Algemeen', kies 'Toegankelijkheid' en kies 'Schakelbediening'

Scroll naar beneden en kies 'Menu-onderdelen'.

Stap 2: Kies 'Hoogste niveau': Vink alleen het onderdeel 'Scrol' aan.

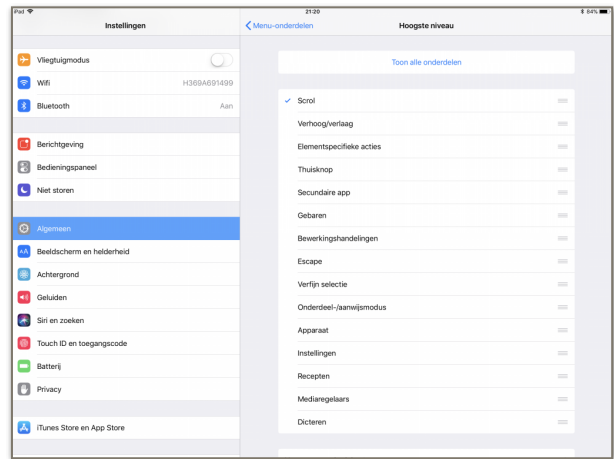

!! Activeer deze functie alleen als er ook daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van **scroll-views** in het communicatiescherm van TouchToTell.

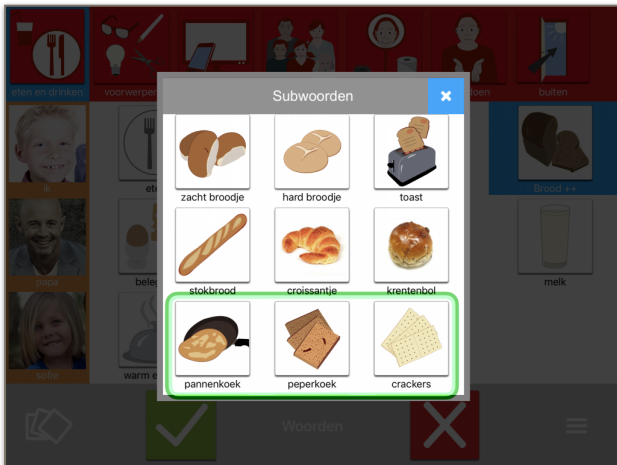

De X rechtsboven is nodig om met schakelbediening uit een view te komen .

Bij handmatig bedienen van het scherm zonder schakelbediening is het het meest functioneel om buiten een pop-Up view te tikken om weer op het hoofdscherm terug te komen. Dit blijft ongewijzigd.

Echter nu de functie **schakelbediening** is geïntegreerd, is het nodig om toch bij elke view een X rechtsboven te plaatsen zodat ook met schakelbediening alle views bereikbaar zijn.

## Schakelbediening en de oefeningen:

Ook alle oefeningen zijn bereikbaar en te gebruiken met 1 knop.

Let op: Als de schakelbediening aan staat is het altijd nodig om het volgende doelwoord of het geluid achter de categorie of vraag eerst af te spelen voordat er een keuze gemaakt wordt uit de antwoorden.

Dit is niet nodig als de schakelbediening uit staat.



*Op deze tekst zijn auteursrechten van toepassing. TouchToTell geeft u toestemming deze tekst te delen of gebruiken mits u hierbij de bronvermelding 'touchtotell' plaatst.*